



Lola

Appareil de massage de poche

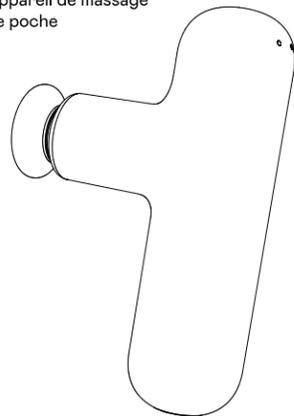

VUE D'ENSEMBLE

Contenu de la boîte

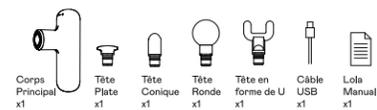

1 Tête de massage




TÊTE RONDE
Détendre les tissus mous et les muscles sensibles

TÊTE EN FORME DE U
Masser le cou et es zones tendineuses (par exemple, les chevilles)

TÊTE CONIQUE
Percuter les tissus profonds (par exemple, les méridiens, les articulations et les points d'acupuncture)

TÊTE PLATE
Masser les principaux groupes de muscles plats (par exemple, le dos)

2 Corps principal

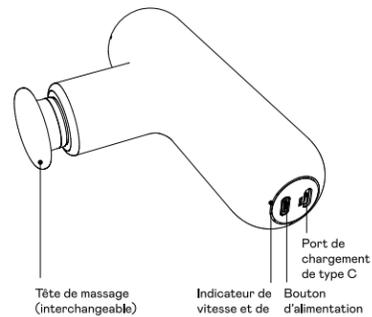

Tête de massage (interchangeable)


Indicateur de vitesse et de

Bouton d'alimentation

COMMENT UTILISER LOLA

1 Fixer la tête de massage

Fixez la tête de massage de votre choix dans l'ouverture à l'avant de l'appareil.

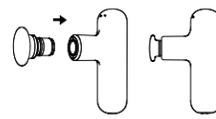

(Toutes les têtes de massage sont fixées de la même manière)

2 Mise en marche /arrêt

Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour mettre en marche ou arrêter


3 Sélection de la vitesse

Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton d'alimentation pour sélectionner la vitesse (Lola fera tourner les paramètres de vitesse dans l'ordre

4 Voyants lumineux

- Après trois secondes de pression pour la mise en marche, la lumière bleue clignote pour indiquer la consommation d'énergie. Quatre lumières bleues clignotantes indiquent une puissance de 100% trois lumières bleues clignotantes indiquent une puissance de 75% deux lumières bleues clignotantes indiquent une puissance de 50% et une lumière bleue clignote pour indiquer une puissance de 25%.
- Une lumière rouge clignotante indique que la batterie a une puissance inférieure à 15% et que l'appareil doit être chargé.
- Après la mise sous tension et l'indication de la puissance, les lumières bleues passent en mode statique.
- Une lumière bleue statique indique la première vitesse, deux lumières bleues statiques indiquent la deuxième vitesse, trois lumières bleues statiques indiquent la troisième vitesse, quatre lumières bleues statiques indiquent la quatrième vitesse.
- Lorsque l'appareil est à la quatrième vitesse, une autre simple pression sur le bouton de mise en marche remet l'appareil au point mort, et la lumière bleue clignote pour indiquer la puissance.
- Lorsque l'appareil est chargé, le témoin lumineux clignote 1-2-3-4-1-2-3-4.
- Lorsque l'appareil est chargé à 25%, une lumière devient statique et les autres lumières continuent à clignoter à tour de rôle. Au fur et à mesure que l'appareil se charge, chaque voyant passe de clignotant à statique jusqu'à ce que les quatre voyants bleus soient statiques, indiquant que la batterie est complètement chargée.

5 Charge

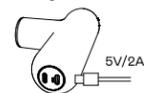

6 Spécifications

- Durée de vie de la batterie: 14-18 heures
- Poids: N.W.: 0,71 kg, G.W.: 1,51 kg
- Taille: 90 x 160 x 45,8 mm
- Capacité de la batterie: 2 000 mAh
- Vitesse nominale: 3 000 tr/min

7 Fonction

L'appareil s'éteint automatiquement après avoir fonctionné en continu pendant 15 minutes. Il est recommandé de laisser l'appareil éteint pendant une courte période avant de reprendre l'utilisation ; si l'appareil n'est pas utilisé pendant cinq minutes, il s'éteindra automatiquement.



Suggestions d'utilisation:

- Soutien avant et après la formation
- Réadaptation suite à une blessure
- Activation et stimulation des muscles
- Soulagement de la douleur myofasciale
- Augmentation et amélioration de la flexibilité/mobilité conjointe
- Renforcement de l'efficacité de la formation
- Accélération de la récupération après l'entraînement
- Amélioration de l'apport sanguin et de l'hydratation de la peau, du fascia et des muscles
- Acidification métabolique
- Détente myofasciale
- Prévention des blessures
- Cicatrisation plus rapide des hématomes et des ecchymoses
- Échauffement des muscles
- Traitement de la cellulite
- Soutien dans le traitement de l'hyperalgésie de la peau



Quand ne pas utiliser Lola:

- Tout type de cancer
- Anastomose par plaque métallique (ne pas utiliser le dispositif directement sur la zone de fracture)
- Ostéoporose
- Dans les zones de thrombose veineuse ou de pulsation
- Hypertension artérielle
- Grossesse (ne pas utiliser le dispositif à proximité immédiate de l'abdomen)
- Calculs rénaux (ne pas utiliser l'appareil près des reins)
- Près d'une varice
- Dans les zones d'inflammation aiguë
- Ne pas masser une zone pendant plus de quatre minutes
- Ne pas masser les zones osseuses (genou, tibia, cheville, etc.)
- Ne pas masser directement sur la colonne vertébrale
- Ne pas masser le visage

Clause de non-responsabilité

Merci d'avoir utilisé le produit. Les informations contenues dans ce document concernent votre sécurité et vos droits et responsabilités légales. Lisez attentivement l'ensemble du document pour vous assurer de la bonne configuration avant l'utilisation. Le fait de ne pas lire et de ne pas suivre les instructions et les avertissements figurant dans ce guide peut entraîner des blessures graves pour vous-même ou pour d'autres personnes, endommager votre produit ou détériorer d'autres objets se trouvant à proximité. Lorsque vous utilisez ce produit, vous indiquez que vous avez lu attentivement cette clause de non-responsabilité et cet avertissement et que vous comprenez et acceptez de respecter les conditions qui y figurent. Vous acceptez d'être seul responsable de votre propre conduite lors de l'utilisation de ce produit, et de toutes les conséquences qui en découlent.

Vous acceptez d'utiliser ce produit uniquement à des fins conformes à toutes les lois, règles et réglementations applicables, ainsi qu'à tous les termes, précautions, pratiques, politiques et directives que notre société a mis et pourrait mettre à disposition. Notre société n'accepte aucune responsabilité pour les dommages ou les blessures, ou toute responsabilité légale encourue directement ou indirectement par l'utilisation du produit. Notre société ne fournira pas de service pour tout produit obtenu par des canaux anormaux.

Instructions de sécurité

- Cet appareil n'est pas recommandé pour le contact direct avec la peau. Pour éviter toute blessure à la peau, l'utilisateur doit se masser le corps en portant des vêtements secs ou après avoir placé une serviette propre et sèche sur la partie du corps. Appuyez doucement et déplacez l'appareil sur le vêtement ou la serviette.
- La haute vitesse et la haute pression ne doivent être utilisées que pour les zones de tissus mous. Ne pas masser la tête ou les zones osseuses à haute vitesse et à haute pression.
- Masser la même partie du corps à grande vitesse et à haute pression pendant une longue période peut provoquer des ecchymoses. Cessez d'utiliser l'appareil si vous ressentez une douleur ou un malaise.
- Veillez à éloigner les doigts, les cheveux et les poils de la partie mobile de l'appareil afin d'éviter tout pincement ou coupure.
- Ne jetez pas cet appareil et n'en faites pas un mauvais usage.
- Ne modifiez pas cet appareil par vous-même sans autorisation.
- Ne faites pas fonctionner ou ne chargez pas l'appareil seul.
- Cet appareil est réservé aux adultes.
- Les personnes présentant des symptômes contre-indiqués doivent demander l'autorisation de leur médecin avant d'utiliser cet appareil.

Avis

- Assurez-vous que la tête de massage n'est pas bloquée lorsque l'appareil est allumé. Si elle est bloquée, elle s'arrêtera et essaiera de redémarrer.
- NE laissez PAS l'appareil entrer en contact avec de l'eau ou un autre liquide. L'appareil n'est pas étanche à l'eau.
- NE démontez PAS le produit, à l'exception des pièces marquées comme étant détachables. Il doit être envoyé au service après-vente ou à un centre de service autorisé pour toute réparation. L'utilisateur est responsable de tous les coûts pertinents.
- Une utilisation continue prolongée peut entraîner une augmentation de la température de surface du moteur. Veuillez utiliser le moteur avec précaution.
- NE laissez PAS tomber ou ne frappez pas le produit. Si le produit est endommagé, défectueux ou fonctionne de manière inhabituelle, contactez le service après-vente.

Stockage et entretien

- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- NE laissez PAS le produit à proximité de sources de chaleur. NE laissez PAS le produit à l'intérieur d'un véhicule les jours de grande chaleur.
- Veillez à stocker le produit dans un environnement sec.
- NE surchargez PAS ou n'utilisez pas la batterie de manière excessive; cette pratique endommagerait le noyau de la batterie.
- N'utilisez jamais le produit lorsque sa température est trop élevée ou trop basse.