

essentiel 

Brosse à dents électrique à piles PULSE BASIC



Notice d'utilisation

Pour vous aider à bien vivre votre achat

Vous venez d'acquérir un produit de la marque Essentiel b et nous vous en remercions. Nous apportons un soin tout particulier à la **FIABILITÉ**, à la **FACILITÉ D'USAGE** et au **DESIGN** de nos produits.
Nous espérons que cette brosse à dents électrique à piles vous donnera entière satisfaction.

consignes d'usage

LISEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET CONSERVEZ-LES POUR POUVOIR LES CONSULTER LORSQUE VOUS EN AUREZ BESOIN.

- Cet appareil est destiné à un usage domestique uniquement. Tout autre usage (professionnel, commercial, etc.) est exclu.
- Utilisez cet appareil uniquement pour le brossage des dents. Toute utilisation autre que celle pour laquelle l'appareil est destiné doit être considérée comme non conforme et donc dangereuse.
- Ne convient pas pour les animaux.
- Les brosses à dents peuvent être utilisés par les enfants et des

personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprenant bien les dangers potentiels. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'eau pénétrer à l'intérieur du corps de la brosse à dents.
- N'immergez pas la brosse à dents dans l'eau ou tout autre liquide.
- Assurez-vous qu'aucun corps

- étranger ne pénètre à l'intérieur de la brosse à dents.
- En cas de mauvais fonctionnement, n'essayez pas de démonter ni de réparer vous-même la brosse à dents, contactez le service après-vente de votre magasin revendeur.
 - Tenez la brosse à dents éloignée des surfaces chaudes. Elle pourrait être endommagée irrémédiablement.
 - N'utilisez pas d'accessoires autres que ceux recommandés par le fabricant.
 - Arrêtez toujours l'appareil (avec le bouton marche/arrêt) lors d'un changement de brosse et avant le nettoyage.
 - Si vous avez des traitements dentaires, consultez votre dentiste avant d'utiliser cette brosse à dents électrique.

- Retirez les piles de la brosse à dents si vous prévoyez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps.
- Ne laissez pas les piles à la portée des enfants. Les enfants pourraient les mettre à la bouche et les avaler.

Recyclage des piles



Ne jetez pas les piles avec les ordures ménagères. Afin de préserver l'environnement, débarrassez-vous des piles conformément aux réglementations en vigueur.

Déposez-les dans votre conteneur à piles le plus proche ou rapportez-les dans votre magasin.

- Ne rechargez pas les piles, ne les

démontez pas, ne les jetez pas dans un feu.

- Ne les exposez pas à des températures élevées ou à la lumière directe du soleil.
- Ne les incinerez pas.

votre produit

Contenu de la boîte

- 1 brosse à dents électrique
- 1 brossette
- 2 piles AA / LR6 de 1,5 V
- 1 notice d'utilisation


Caractéristiques techniques

- Brossage « 2D » : associe oscillations et rotations
- 1 vitesse : 3850 mouvements / minute
- Bouton marche/arrêt
- Fonctionne avec 2 piles de type AA / LR6 de 1,5 V (fournies)
- Rappel intelligent : une micro-coupure toutes les 30 secondes vous invite à changer la zone de brossage (4 zones : haut avant/arrière et bas avant/arrière) afin de vous assurer un brossage complet.
- Protection IPX4
- Produit compatible avec les brossettes dentaires de la marque Oral B*
- Brins 15/100 de mm finement arrondis en nylon DuPont™ Tynex®**

* La marque appartient au titulaire respectif avec lequel BOULANGER n'a pas de lien.

** DuPont™ est une marque et Tynex® est une marque déposée de DuPont.


description de l'appareil

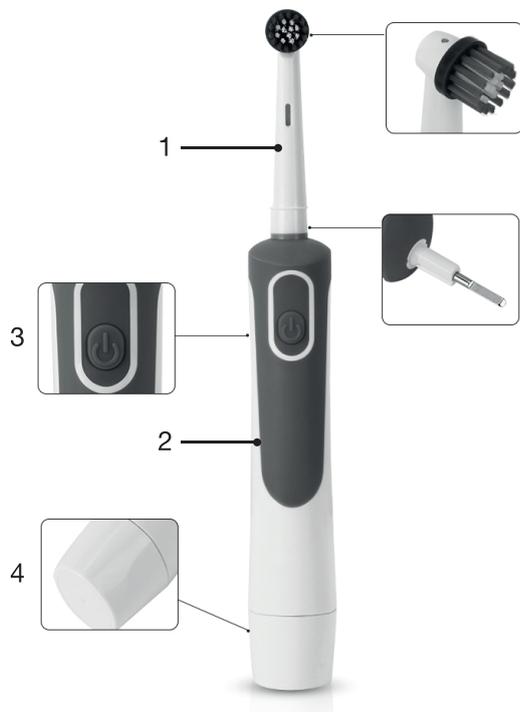

1. Brossette
2. Corps de l'appareil
3. Bouton marche/arrêt
4. Compartiment des piles

installation / remplacement des piles

- Retirez le couvercle du compartiment des piles et insérez 2 piles de type AA / LR6 de 1,5 V en respectant les polarités indiquées (+/-).
- Refermez ensuite le couvercle du compartiment des piles et veillez à ce qu'il soit bien emboîté.
- Remplacez les piles lorsque vous constatez que l'intensité du brossage devient trop faible.
- Utilisez uniquement le type de piles spécifié dans cette notice.
- N'utilisez pas ensemble deux types de piles différents.
- Si vous n'utilisez pas la brosse à dents pendant un certain temps, retirez les piles du corps de l'appareil.
- Remplacez les piles lorsqu'elles sont usagées ou en cas de fuite.
- Contrôlez l'état des piles périodiquement. La fuite des piles peut endommager la brosse à dents. En cas de fuite des piles, ne réutilisez pas la brosse à dents.

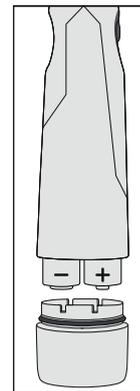

avant la première utilisation

Avant la première utilisation, nettoyez la nouvelle brosette sous l'eau du robinet.

utilisation

1. Installez la brosette sur le corps de l'appareil.
2. Humidifiez la brosette sous l'eau du robinet.
3. Appliquez une petite quantité de dentifrice sur la brosette.
4. Placez la brosse à dents dans la bouche puis, appuyez sur le bouton marche/arrêt

Toutes les 30 secondes, la brosse à dents s'arrête brièvement deux fois pour vous inviter à changer la zone de brossage (4 zones : haut avant/arrière et bas avant/arrière).

Après deux minutes, la brosse à dents s'arrête brièvement quatre fois pour vous indiquer que vous avez effectué la durée de brossage recommandée. N'hésitez pas à consulter votre dentiste pour obtenir des conseils de brossage.

5. Pour éteindre la brosse à dents, appuyez sur le bouton marche/arrêt.
6. Retirez la brosse à dents de la bouche puis, nettoyez la brosette et la brosse à dents sous l'eau du robinet.


REMARQUE : Après les premières utilisations d'une brosse à dents électrique, les gencives peuvent saigner légèrement. En règle générale, le saignement doit cesser au bout de quelques jours. Si cela persiste plus de deux semaines, nous vous invitons à consulter votre dentiste.

CONSEIL : N'appuyez pas la brosse à dents trop fort sur les dents. N'effectuez pas le mouvement de brossage comme avec une brosse à dents manuelle en complément : la brosse à dents le fait pour vous. Appliquez doucement la brosse à dents électrique contre les dents.

nettoyage et entretien

Nettoyage de la brosette

- Rincez la brosette sous l'eau du robinet après usage. Essorez l'eau présente sur la brosette à l'aide d'une serviette et laissez-la sécher à l'air libre.

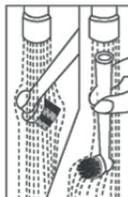

Nettoyage du corps de l'appareil

- **N'immergez jamais la brosse à dents dans l'eau ou tout autre liquide.**
- Nettoyez le corps de l'appareil en le passant d'abord sous l'eau du robinet puis, essuyez-le à l'aide d'une serviette de toilette.
- Pour nettoyer le corps de l'appareil, vous pouvez utiliser, si nécessaire, un produit détergent doux.
- N'utilisez jamais de détergent abrasif ni de solvant qui pourraient endommager les surfaces en plastique.
- Assurez-vous de ne pas endommager la bague colorée située à l'extrémité de la brosette.

Remplacement de la brosette

- Remplacez la brosette lorsque les poils bleus deviennent complètement blancs et qu'ils se plient vers l'extérieur. La décoloration des poils de la brosette vous indique qu'elle est usée et que vous devez la remplacer.
- Retirez la brosette en la tirant vers le haut.
- Lors de l'installation de la nouvelle brosette, veillez à ce que la bague colorée soit positionnée correctement.
- Nous vous recommandons de remplacer la brosette tous les 3 mois. Vous pouvez vous procurer des brosettes de remplacement compatibles avec votre brosse à dents électrique auprès de votre magasin revendeur.

Toutes les informations, dessins, croquis et images dans ce document relèvent de la propriété exclusive de SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION se réserve tous les droits relatifs à ses marques, créations et informations. Toute copie ou reproduction, par quelque moyen que ce soit, sera jugée et considérée comme une contrefaçon.

All information, designs, drawings and pictures in this document are the property of SOURCING & CREATION. SOURCING & CREATION reserves all rights to its brands, designs and information. Any copy and reproduction through any means shall be deemed and considered as counterfeiting.

Brosse à dents électrique à piles PULSE BASIC



Protection de l'environnement

Ce symbole apposé sur le produit signifie qu'il s'agit d'un appareil dont le traitement en tant que déchet est soumis à la réglementation relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Cet appareil ne peut donc en aucun cas être traité comme un déchet ménager, et doit faire l'objet d'une collecte spécifique à ce type de déchets. Des systèmes de reprise et de collecte sont mis à votre disposition par les collectivités locales (déchèterie) et les distributeurs. En orientant votre appareil en fin de vie vers sa filière de recyclage, vous contribuerez à protéger l'environnement et empêcherez toute conséquence nuisible pour votre santé.



Testé dans nos laboratoires

Garantie valide à partir de la date d'achat (ticket de caisse faisant foi). Cette garantie ne couvre pas les vices ou les dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale du produit.

