

MIRACLE SMILE[®]

HYDROPULSEUR 360°

MANUEL D'INSTRUCTIONS




Merci d'avoir acheté le jet dentaire Miracle Smile®, le moyen rapide pour finaliser le nettoyage des dents et gencives en quelques secondes !

Cette notice contient des informations importantes pour l'usage et la sécurité. Lire attentivement et suivre les instructions avant utilisation. Une utilisation incorrecte peut entraîner des blessures. Conserver pour référence ultérieure


DESCRIPTION

1. Tête de jet en H
2. Réservoir d'eau
3. Trappe de remplissage
4. Bouton de retrait de la tête
5. Bouton On/Off
6. Bouton de sélection du mode
7. Indicateurs lumineux
8. Port de chargement
9. Câble de chargement USB-C

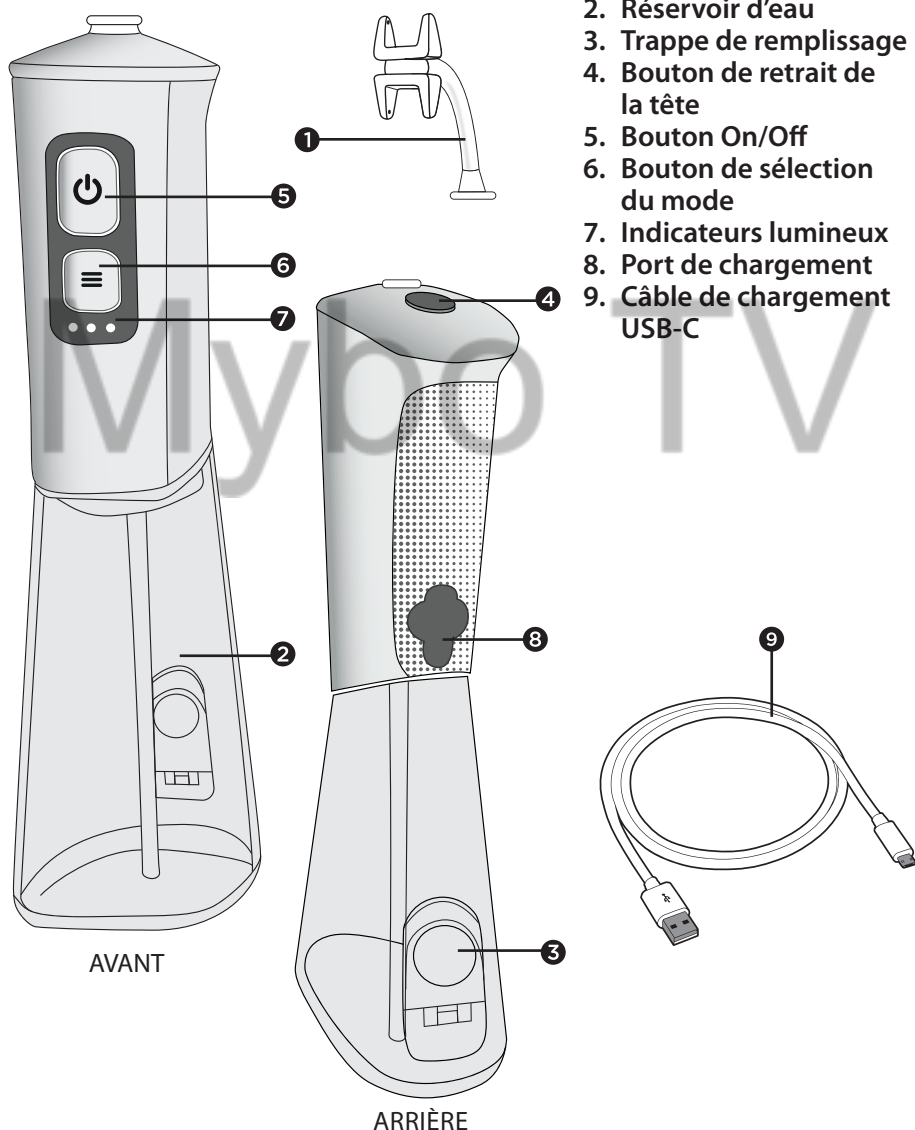


CHARGEMENT

Nous vous recommandons de charger complètement votre Miracle Smile® avant la première utilisation.

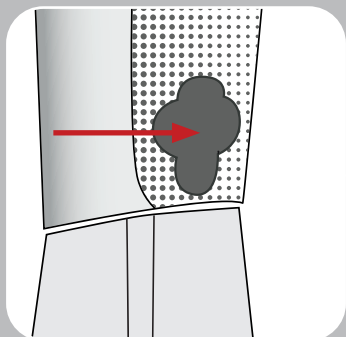

1. Ouvrez le couvercle de protection en silicone situé sur le port de chargement à l'arrière de l'appareil

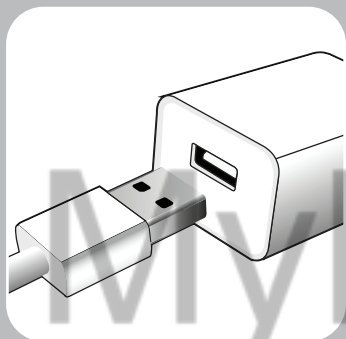


2. Insérez la petite fiche du câble de chargement dans le port et la fiche USB dans le port USB d'un adaptateur secteur (non fourni).




3. Les témoins lumineux clignotent pendant la charge. Lorsque les 3 témoins lumineux cessent de clignoter et restent allumés, l'appareil est complètement chargé. Retirez alors le câble de chargement de l'appareil.


UTILISATION

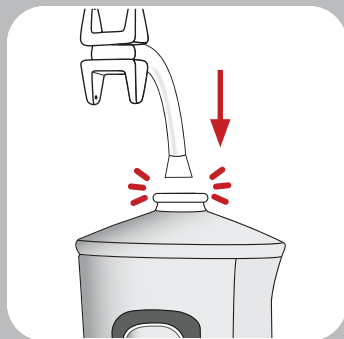

1. Insérez la tête de jet en H sur le haut de l'appareil et appuyez pour la mettre en place.

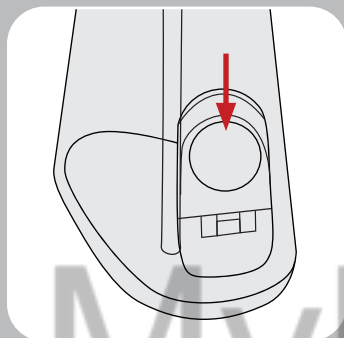


2. Ouvrez le capot de remplissage du réservoir d'eau situé à l'arrière.

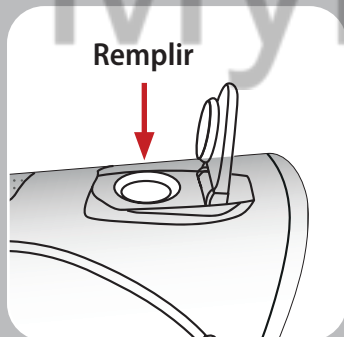


3. Remplissez le réservoir d'eau avec précaution (220ml).

NOTE : pour un nettoyage encore plus optimal, ajoutez du bain de bouche directement dans le réservoir puis finissez de remplir avec de l'eau.

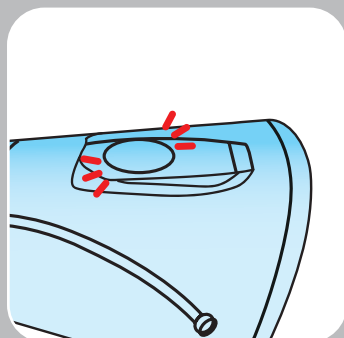


4. Refermez le capot du réservoir d'eau jusqu'au clic pour éviter tout risque de fuite.

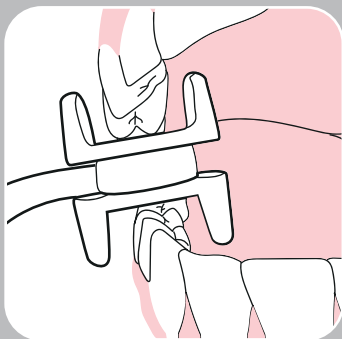

5. Placez la tête de jet en H dans votre bouche. Positionnez le bas du H autour de vos dents du bas et fermez doucement la bouche pour positionner que vos dents du haut se positionnent à l'intérieur du haut du H.

NOTE : Appuyez sur le bouton ON/OFF après avoir positionné dans votre bouche.

Choisissez le niveau de pression entre Faible, Moyen et Intense en utilisant le bouton de sélection du mode.

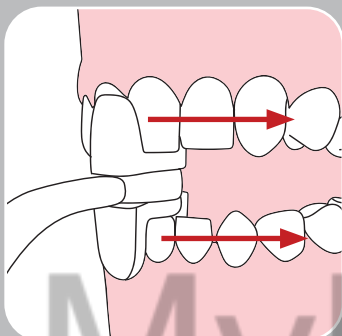


6. Faites doucement glisser la tête en H le long de vos dents en passant d'un côté à l'autre dans un mouvement continu et contrôlé. Si besoin, remplissez à nouveau le réservoir d'eau et répétez l'opération jusqu'à obtention du résultat souhaité.

POUR DE MEILLEURS RÉSUTATS : veillez à incliner la tête en H en fonction de là où vous passez et des différents types de dents, afin que la tête épouse bien toujours les dents du haut et du bas.



7. Lorsque vous avez terminé, éteignez l'appareil en appuyant sur le bouton ON/OFF.

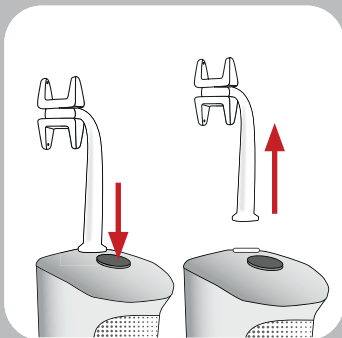

8. Pour retirer la tête de jet en H, appuyez sur le bouton situé à côté de la tête et retirez-la doucement de l'appareil.

ENTRETIEN

Après chaque utilisation, videz le réservoir d'eau, nettoyez quelconque débris présent et laissez sécher à l'air libre. Stockez dans un endroit frais et sec jusqu'à la prochaine utilisation.

Pour retirer/remplacer la tête de jet en H, appuyez sur le bouton situé sur le haut de l'appareil et tirez sur la tête pour la retirer.

AVERTISSEMENTS

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, notamment en présence d'enfants, il est important de suivre les précautions de base suivantes :

ATTENTION : pour éviter tout risque de blessure :

- Ne projetez pas d'eau directement sous la langue, dans les oreilles, le nez ou toute autre zone sensible. La pression exercée par ce produit peut causer de sérieux dommages sur ces zones.
- Ne projetez pas d'eau directement dans le nez ou les oreilles.
- Ce produit doit être utilisé uniquement suivant ces instructions ou suivant les recommandations de votre dentiste.
- Utilisez uniquement la tête et autres accessoires inclus.
- Ne mettez pas de corps étranger dans aucun des orifices du produit.
- N'utilisez pas ce produit en extérieur ni dans un endroit où un aérosol (spray) a été utilisé ou de l'oxygène est administré.
- N'utilisez pas d'iode, de solution saline ou d'huiles essentielles concentrées insolubles dans l'eau.
- Remplissez le réservoir d'eau avec de l'eau tiède ou une solution dentaire recommandée par un professionnel uniquement.
- Retirez tout bijou buccal avant d'utiliser ce produit.
- N'utilisez pas ce produit si vous avez une plaie ouverte sur la langue ou dans la bouche.

AVERTISSEMENTS MÉDICAUX :

- Si votre médecin vous a prescrit une prémédication antibiotique avant une intervention dentaire, il est conseillé de consulter votre dentiste avant d'utiliser cet instrument ou tout autre appareil d'hygiène dentaire
- Une supervision supplémentaire est nécessaire lors d'une utilisation par, proche, ou sur un enfant ou une personne invalide.
- Les enfants doivent être avertis pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

DONNÉES TECHNIQUES

3.7V

IPX7 : résiste à l'immersion dans l'eau

Batterie Lithium Polymer : 3.7V 1000mAh 3.7Wh

Contenu :

1 hydropulseur (avec batterie intégrée),

1 tête de jet

1 câble USB-C

1 manuel d'instructions

MIRACLE SMILE®
HYDROPULSEUR 360°
SMILE01



Les déchets des Equipements Electriques et Electroniques (DEEE), doivent être collectés et recyclés séparément afin d'optimiser le taux de récupération et le recyclage des matériaux qui les composent et réduire l'impact sur la santé humaine et l'environnement. Déposez votre appareil dans un service de ramassage spécialisé, en magasin ou le donner au service d'évacuation des appareils usagés de votre commune. Respecter les réglementations en vigueur localement.



Importé par / Ingevoerd door:

BEST OF TV s.a.s.

47 avenue des genottes

CS 30021

95895 Cergy Pontoise cedex

sav@bestoftv.fr

Fabriqué en Chine



Mybo TV

MIRACLE SMILE[®]

MONDDOUCHE 360°


GEBRUIKSAANWIJZING



Bedankt voor uw aankoop van de Miracle Smile® monddouche, hét middel om tanden en tandvlees te reinigen in enkele seconden!


Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over gebruik en veiligheid. Gelieve de instructies vóór gebruik aandachtig te lezen en op te volgen. Onjuist gebruik kan letsels veroorzaken. Bewaar deze gebruiksaanwijzing. U kunt ze later nog nodig hebben

BESCHRIJVING

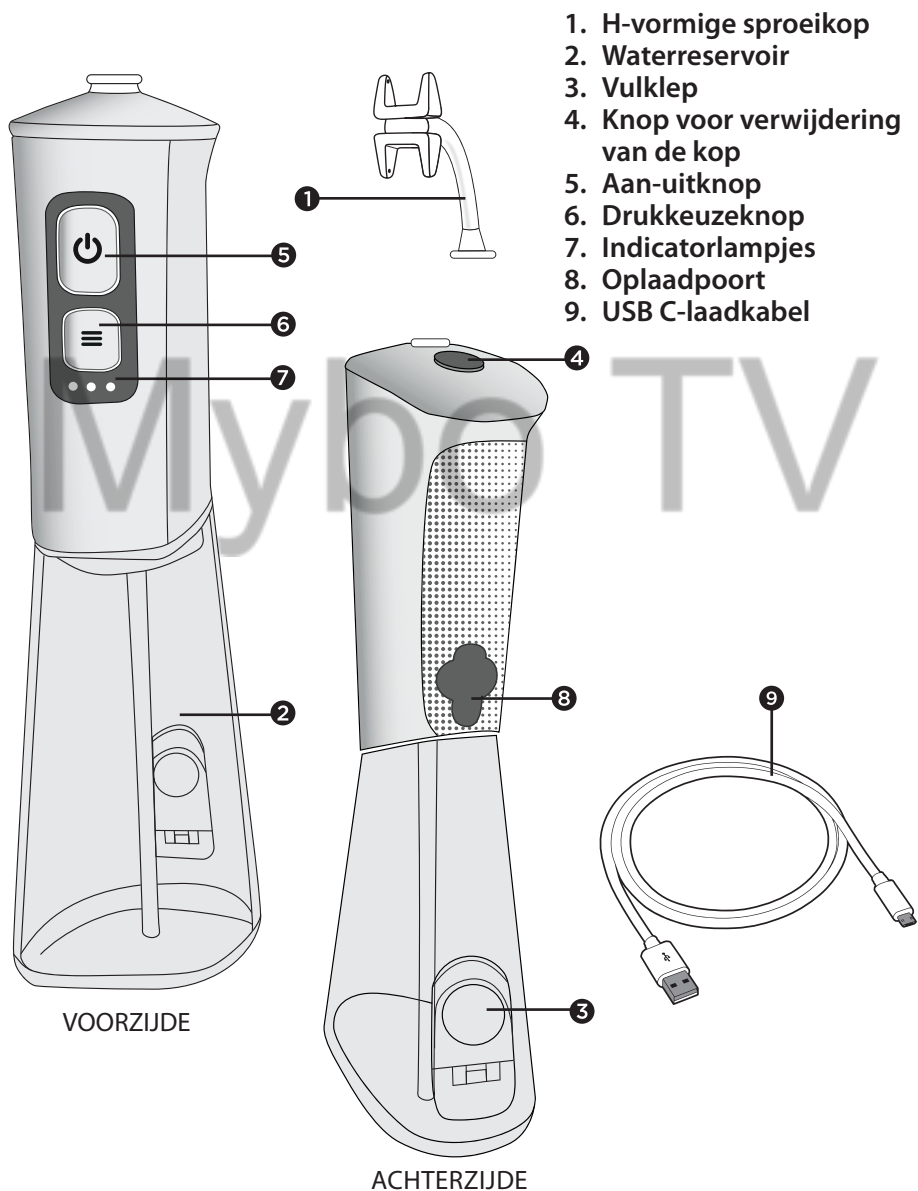


OPLADEN

We raden u aan om uw Miracle Smile volledig op te laden voor u het apparaat voor het eerst gebruikt.

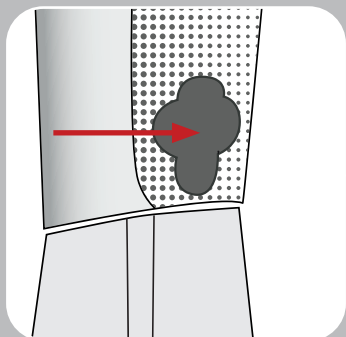

1. Open het silicone beschermklepje op de oplaadpoort aan de achterkant van het apparaat.

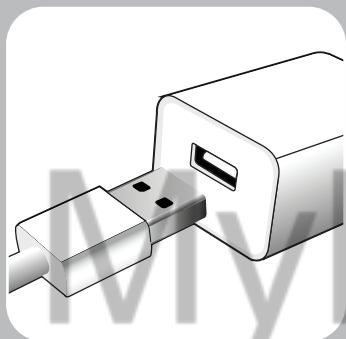


2. Steek de kleine stekker van de oplaadkabel in de poort en de USB-stekker in de USB-poort van een netadapter (niet meegeleverd).




3. De indicatorlampjes knipperen tijdens het opladen. Wanneer de 3 indicatorlampjes stoppen met knipperen en blijven branden, is het apparaat volledig opgeladen. Haal de oplaadkabel uit het apparaat.


GEBRUIK

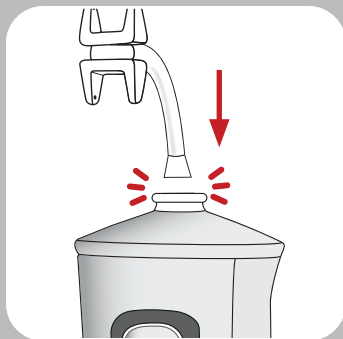

1. Steek de H-vormige sproeikop in de bovenkant van het apparaat en duw tot de kop vastzit.

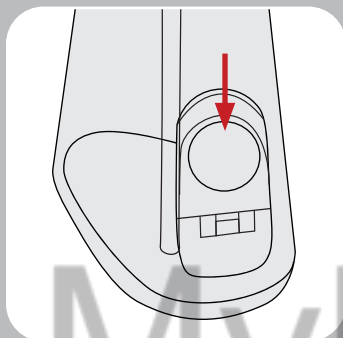


2. Open de vuldop van het reservoir aan de achterkant van het apparaat.

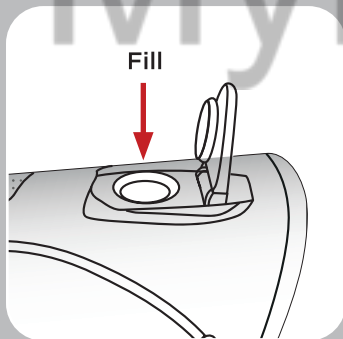


3. Vul het waterreservoir voorzichtig met water (220 ml).

OPMERKING: Voor een nog betere reiniging kunt u wat mondwater rechtstreeks in het reservoir gieten en vervolgens bijvullen met water.

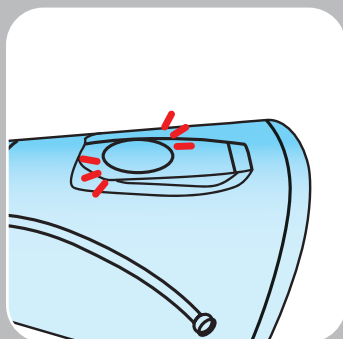


4. Sluit het deksel van het waterreservoir tot het vastklikt om lekken te voorkomen.

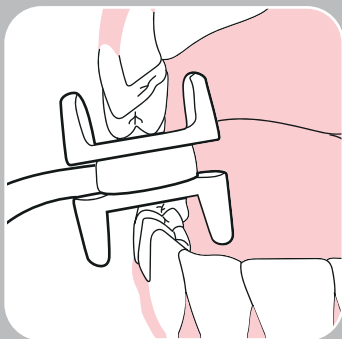

5. Plaats de H-vormige sproeikop in de mond. Plaats de onderkant van de H rond de ondertanden en sluit de mond voorzichtig zodat de boventanden in de bovenkant van de H zitten.

OPMERKING: Druk op de aan-uitknop nadat u het apparaat in uw mond hebt geplaatst.

Kies het drukniveau (Laag, Medium en Intens) met de drukkeuzeknop.

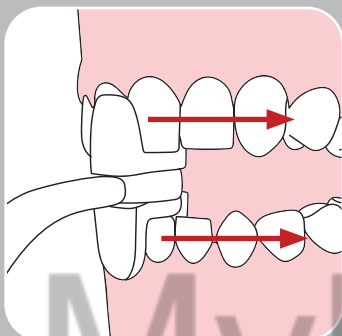


6. Schuif de H-vormige kop zachtjes langs de tanden en beweeg van links naar rechts in een continue, gecontroleerde beweging. Vul indien nodig het waterreservoir bij en herhaal de handeling tot u het gewenste resultaat hebt bereikt.

VOOR OPTIMALE RESULTATEN: Kantel de H-vormige kop, afhankelijk van de zone waar u doorheen gaat en de verschillende soorten tanden, zodat de kop altijd goed aansluit op de boven- en ondertanden.



7. Schakel het apparaat uit door op de aan-uitknop te drukken wanneer u klaar bent.

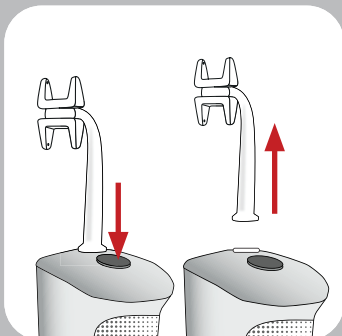

8. Om de H-vormige sproeikop te verwijderen, drukt u op de knop naast de kop en trekt u de kop voorzichtig uit het apparaat.

ONDERHOUD

Maak na elk gebruik het waterreservoir leeg, verwijder eventueel vuil en laat het aan de lucht drogen. Bewaar het apparaat op een koele en droge plaats zolang u het niet opnieuw gebruikt.

Om de H-vormige sproeikop te verwijderen/vervangen, drukt u op de knop aan de bovenkant van het apparaat en trekt u de kop eruit.

WAARSCHUWINGEN

Bij het gebruik van elektrische apparaten, vooral in het bijzijn van kinderen, is het belangrijk om de volgende basisvoorzorgsmaatregelen in acht te nemen:

WAARSCHUWING: om elk risico op letsels te vermijden:

- Spuit geen water direct onder de tong, in de oren, neus of andere gevoelige zones. De druk die door dit apparaat wordt uitgeoefend, kan die zones ernstig beschadigen.
- Spuit het water niet rechtstreeks in de neus of de oren.
- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt volgens deze instructies of zoals aanbevolen door uw tandarts.
- Gebruik alleen de kop en andere accessoires die meegeleverd werden.
- Steek geen vreemde voorwerpen in de openingen van het apparaat.
- Gebruik dit apparaat niet buitenshuis of in een ruimte waar een aerosol (spray) is gebruikt of zuurstof wordt toegediend.
- Gebruik geen jodium, zoutoplossing of geconcentreerde etherische oliën die niet in water oplosbaar zijn.
- Vul het waterreservoir enkel met lauw water of een tandheelkundige oplossing die is aanbevolen door uw tandarts.
- Verwijder alle mondjuwelen voor u dit apparaat gebruikt.
- Gebruik dit apparaat niet als u een open wonde op de tong of in de mond hebt.

MEDISCHE WAARSCHUWINGEN:

- Als uw arts u vóór een tandheelkundige ingreep antibiotica heeft voorgeschreven, is het raadzaam uw tandarts te raadplegen voordat u dit of een ander hygiëneapparaat voor uw gebit gebruikt.
- Extra toezicht is vereist bij gebruik door, in de buurt van of bij een kind of een persoon met een beperking.
- Kinderen moeten gewaarschuwd worden dat ze niet met het apparaat mogen spelen.

TECHNISCHE GEGEVENS

3,7V

IPX7: dompeldicht

Lithium-polymeerbatterij: 3,7V, 1000 mAh, 3,7Wh

Inhoud:

1 monddouche (met geïntegreerde batterij)

1 kopaccessoire

1 USB C-kabel

1 gebruiksaanwijzing

MIRACLE SMILE®
MONDDOUCHE 360°
SMILE01



Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) moet gerecycled worden en gescheiden worden ingezameld om de recuperatie en het recyclen van de onderdelen van deze apparaten te optimaliseren en de impact op de gezondheid van de mens en op het milieu te beperken. Gelieve uw apparaat af te geven bij een gespecialiseerd inzamelpunt of mee te geven met de ophaaldienst voor afgedankte apparatuur van uw gemeente. Gelieve de geldende voorschriften te respecteren.



Importé par / Ingevoerd door:

BEST OF TV s.a.s.

47 avenue des genottes

CS 30021

95895 Cergy Pontoise cedex

sav@bestoftv.fr

Made in China



Mybo TV