

MassFit 1

Masseur de pieds

Merci d'avoir acheté le masseur de pieds Oxilom MassFit 1

Veuillez lire et conserver ce manuel d'utilisation pour une utilisation immédiate ou future.

Règlement sur la sécurité

Lors de l'utilisation du produit, veuillez suivre les instructions suivantes :

DANGER

Pour éviter tout risque de choc électrique, pensez à débrancher immédiatement ce produit de la prise électrique, après son utilisation et avant son nettoyage.

AVERTISSEMENT

Afin de minimiser autant que possible, le risque de brûlures, de chocs électriques ou de blessures aux personnes :

- 1) Le produit ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez la prise de courant lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre en place ou d'enlever des pièces du produit.
- 2) Ne pas utiliser sous une couverture ou un oreiller. Un échauffement excessif peut se produire et causer un choc électrique ou des blessures aux personnes.
- 3) Ne transportez pas ce produit par son cordon d'alimentation ou n'utilisez pas ce cordon comme poignée.
- 4) Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsque les ouvertures d'aération au niveau des pieds sont obstruées.
- 5) Ne laissez aucun objet dans une ouverture au niveau des pieds qui pourrait gêner la circulation d'air.
- 6) Ne pas utiliser à l'extérieur.
- 7) Ne pas utiliser là où des produits en aérosol (pulvérisateur) sont utilisés.
- 8) Pour arrêter le produit, appuyez sur le bouton OFF et débranchez la prise du courant.

9) Il faut assurer une surveillance étroite lorsque cet appareil est utilisé, par/ou près d'enfants, ou de personnes handicapées, pour s'assurer qu'ils utilisent le produit correctement.

10) Tenez le cordon loin des surfaces chauffées, des brûlures pouvant être causés. Ne pas utiliser sur des zones cutanées insensibles à la chaleur ou ayant une mauvaise circulation sanguine.

11) L'appareil a une surface chauffée. Les personnes insensibles à la chaleur doivent donc être prudentes lors de l'utilisation de l'appareil.



12) L'appareil ne doit être alimenté qu'à une tension de sécurité correspondant au voltage de l'appareil.

13) L'appareil ne doit être utilisé qu'avec l'alimentation fournie avec l'appareil.

14) Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expériences et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité.

15) Une attention particulière doit être portée aux composants les plus sensibles à l'usure, afin de remplacer immédiatement ces composants défectueux et/ou de garder l'équipement hors d'usage jusqu'à la réparation.

Nom et fonction des pièces du produit

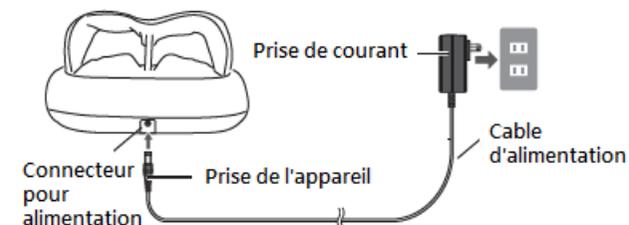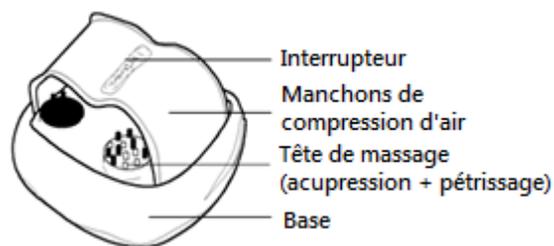

Fonctionnement

1. **Marche / Arrêt** : Appuyez sur l'interrupteur pour allumer le produit. Une durée de 15 minutes de massage est préétablie lorsque le produit est mis en marche.

- La fonction massage shiatsu s'active à la mise sous tension, par défaut en mode faible (voir utilisation de la commande de fonctionnement du produit ci-dessous).
- La fonction compression d'air s'active à la mise sous tension, par défaut en mode faible (voir utilisation de la commande de fonctionnement du produit ci-dessous).
- La fonction chaleur est en marche à la mise sous tension (voir utilisation de la commande de fonctionnement du produit ci-dessous).

Quand les 15 minutes sont écoulées, la machine s'arrête de masser et passe en mode veille.

Appuyez de nouveau sur l'interrupteur marche/ arrêt afin d'arrêter le produit. Tous les massages sont arrêtés et le système est en mode veille.


2. **Chaleur** : Par défaut en marche lors du démarrage. Appuyez sur le bouton '2' pour arrêter le mode chaleur.

3. Vitesse : Réglée par défaut en mode faible lors de la mise sous tension, appuyez ensuite sur le bouton '3' pour régler la vitesse selon votre choix. La vitesse change à chaque fois que vous appuyez sur ce bouton que vous pouvez visualiser sur les voyants LED situés sous le bouton (LED de gauche vitesse faible, LED de droite vitesse élevée).

4. Compression d'air : Réglée par défaut sur mode faible à la mise sous tension, Appuyer sur le bouton '4' pour augmenter le niveau d'intensité à 'moyen' ou 'élevé', le voyant LED correspondant s'allume. (Intensité faible sur la gauche, moyenne au milieu, élevée sur la droite)

Utilisation de la commande de fonctionnement du produit

1. Interrupteur : marche / arrêt
2. Chaleur : marche / arrêt
3. Vitesse de massage shiatsu: faible / élevée
4. Niveaux de compression d'air : faible / moyen / élevée

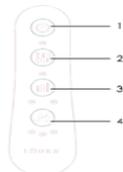

	Ce produit est destiné UNIQUEMENT à un usage domestique et ne doit pas être utilisé à des fins commerciales ou médicales. Si vous avez des problèmes de santé, consultez votre médecin avant d'utiliser ce masseur de pieds.
	Ce produit ne doit être utilisé que dans des endroits fermés (à l'intérieur).
	NE PAS utiliser ce produit dans des pièces humides. (Par exemple, lors d'un bain ou d'une douche)
	NE PAS laver ! NE PAS nettoyer !

Problèmes liés au fonctionnement du produit

Indice	Causes	Solutions
Le produit ne fonctionne pas	La prise de courant n'est pas insérée correctement.	Insérez la prise de courant correctement et en toute sécurité.
	L'interrupteur marche/arrêt n'est pas actionné. Le produit s'est éteint automatiquement après un massage de 15 minutes.	Cliquez sur l'interrupteur marche/ arrêt. Si vous voulez un autre massage, appuyez à nouveau sur l'interrupteur marche/ arrêt.
Le produit est en surchauffe ou s'arrête soudainement à mi-chemin	Vous avez déjà utilisé le produit plusieurs fois consécutives.	Enlevez la prise de courant et laissez-le refroidir. Débranchez toujours la prise après chaque utilisation.

Si vous avez encore un problème après avoir utilisé les méthodes ci-dessus, veuillez contacter le distributeur ou vous avez acheté votre produit pour le service après-vente.

Pour nettoyer et entretenir le produit

1. Nettoyage

Avant de nettoyer, assurez-vous que l'interrupteur est à l'arrêt et que la fiche d'alimentation a été retirée de la prise.

Veuillez utiliser un chiffon sec pour nettoyer le produit.



2. Maintenance

Garder le produit propre et loin de l'humidité.

Attention

N'utilisez pas de benzène, de diluant ou d'autres détergents agressifs pour nettoyer le produit, sinon il risque de perdre sa couleur.

Paramètres techniques

Nom : MassFit 1

N° de modèle : EMK-739

Tension nominale : DC12V 2,5A Puissance nominale : 30W
DC 24V n'est pas autorisé.

	Elimination correcte de ce produit
	Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être éliminé avec d'autres déchets ménagers dans toute l'UE. afin d'éviter que l'élimination incontrôlée des déchets puisse nuire à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable pour promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le détaillant où le produit a été acheté. Ils peuvent recycler ce produit sans danger pour l'environnement.

Importé par :

STAB XTOM SARL

46 Avenue des frères Lumières 78190 TRAPPES, France