

iSee 4

MANUEL
D'UTILISATION

breo®

Merci d'avoir acheté le masque de relaxation Breo iSee4

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation, et conservez-les soigneusement pour consultation ultérieure.

INTRODUCTION

Le fonctionnement du masseur iSee4 eve repose sur une pression pneumatique intelligente et une technologie de contrôle via microprocesseur. Grâce à ses mouvements de pétrissage et de massage, ainsi que par des compressions chaudes, il vous permet de maintenir vos yeux en bonne santé. Cet appareil vous offre également la possibilité d'entendre une agréable musique pendant les massages. Grâce à sa forme pliable à 180 °, intégrant toutes les fonctionnalités, le masseur couvre complètement vos yeux et vous rend votre vitalité et votre vigueur.

CONFIGURATION DU PRODUIT

Le masseur inclut : une unité principale, un chargeur, un manuel d'utilisation.



unité principale



chargeur




manuel d'utilisation

-1-



CONFIGURATION DES FONCTIONS


1. Indicateur d'alimentation
2. Bouton Marche / Arrêt
3. Écran d'affichage
4. Boucle d'ajustement élastique
5. Entrée CC

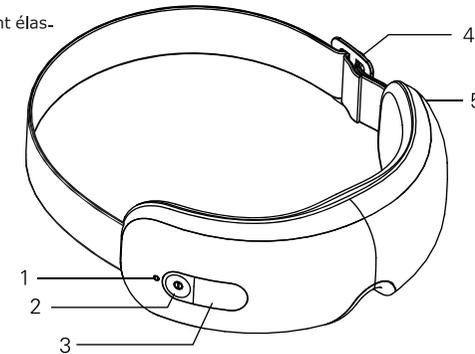

FONCTIONNEMENT

Marche

1. Ouvrez la protection du port de charge situé sur le couvercle arrière de l'unité principale.
2. Branchez le cordon d'alimentation à une prise murale. Nous vous suggérons pour cela d'utiliser une barre multiprise protégée contre les surtensions, et de brancher l'autre extrémité dans la prise RCA jack sous le couvercle arrière.
3. L'indicateur d'alimentation sur l'écran LCD clignote pendant la charge ; le clignotement s'arrête une fois que l'appareil est complètement chargé.
4. Le produit ne peut pas être utilisé pendant la charge (si le produit est utilisé pendant son chargement, il passera en mode d'auto-protection entraînant son arrêt automatique)
5. Le temps de charge est de 2 à 3 heures.

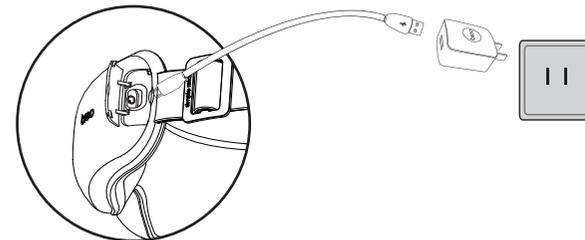

-2-



FUNCTIONNEMENT

Sélection du mode

À l'allumage, le mode par défaut de l'appareil est le mode de VEILLE. Appuyez légèrement sur la touche Marche / Arrêt pour passer au mode suivant.

SLEEP MODE (mode veille)

Durée : 10 minutes
Pression pneumatique : MARCHE
Compression chaude : MARCHE
Vibration : ARRÊT
Musique : ARRÊT

MED MODE (mode modéré)

Durée : 15 minutes
Pression pneumatique : MARCHE
Compression chaude : MARCHE
Vibration : ARRÊT
Musique : MARCHE

HARD MODE (mode puissant)

Durée : 20 minutes
Pression pneumatique : MARCHE
Compression chaude : MARCHE
Vibration : MARCHE
Musique : MARCHE

Éteindre

Appuyez de manière prolongée sur la touche Marche / Arrêt pour éteindre l'appareil et il cessera de fonctionner.

PRÉCAUTIONS

Veuillez lire attentivement le manuel d'utilisation pour utiliser ce produit correctement et en toute sécurité.

1. Veuillez ne pas utiliser ce produit pendant que vous conduisez.
2. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un environnement dont la température ou le degré d'humidité est excessivement élevé.
3. Placez d'abord l'appareil sur vos yeux puis allumez-le pour éviter d'endommager la poche gonflable due à une surpression.
4. Il est fortement déconseillé aux personnes souffrant de maladies oculaires, telles que le glaucome, la cataracte ou le décollement de la rétine, d'utiliser cet appareil.
5. Les personnes ayant subi une chirurgie oculaire ne peuvent pas utiliser ce produit.
6. Les personnes souffrant d'AVC, d'hypertension d'hypotension ne devraient pas utiliser ce produit.
7. Les personnes léthargiques ou les personnes ayant un handicap physique ou mental ou une incapacité intellectuelle ne devraient pas être autorisées à utiliser ce produit.

8. Les personnes ayant subi une chirurgie oculaire ne peuvent pas utiliser ce produit.
9. Les enfants de moins de 7 ans ne peuvent pas utiliser ce produit.
10. Veuillez utiliser la source d'alimentation stabilisée fournie par notre entreprise et prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires.
11. Il s'agit d'un produit de soins de santé domestique. Il ne peut donc pas être utilisé pour diagnostiquer ou guérir une maladie connue ou pour toute autre utilisation commerciale.
12. Si vous devez nettoyer l'appareil, essayez-le avec un coton imbibé d'alcool. Ne jamais utiliser d'eau pour laver l'appareil.
13. Le masseur est doté d'une fonction de compression chaude où la température peut atteindre 42 ° C. Les utilisateurs insensibles aux variations de température doivent être prudents en l'utilisant.
14. Retirez vos lentilles de contact ou vos lunettes avant d'utiliser l'appareil.

DÉPANNAGE ET SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Si vous deviez rencontrer un problème lors de l'utilisation de l'appareil, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Si le problème persiste ou que l'appareil ne fonctionne pas normalement, veuillez l'éteindre et contacter votre centre de maintenance local. Ne pas démonter ou réparer vous-même l'appareil.

Problème	Explications possibles	Solutions
Impossible de le mettre en marche	Vérifiez si le câble est en bon état	Vérifiez si le câble est bien branché
	Vérifiez si le niveau de la batterie est faible	Si oui, chargez la batterie
La pression pneumatique est trop faible	Vérifiez si le niveau de la batterie est faible	Si oui, veuillez la recharger immédiatement

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	CC : 5 V - 1 A
Puissance	5 W
Environnement idéal	Température : 5°C - 40°C - Humidité relative : <80 % Pression atmosphérique : 860 hpa - 1060 hPa
Dimensions	Unité principale : L.208 mm x l.106 mm x h.76 mm
Poids net	318 g