


Silk'n®

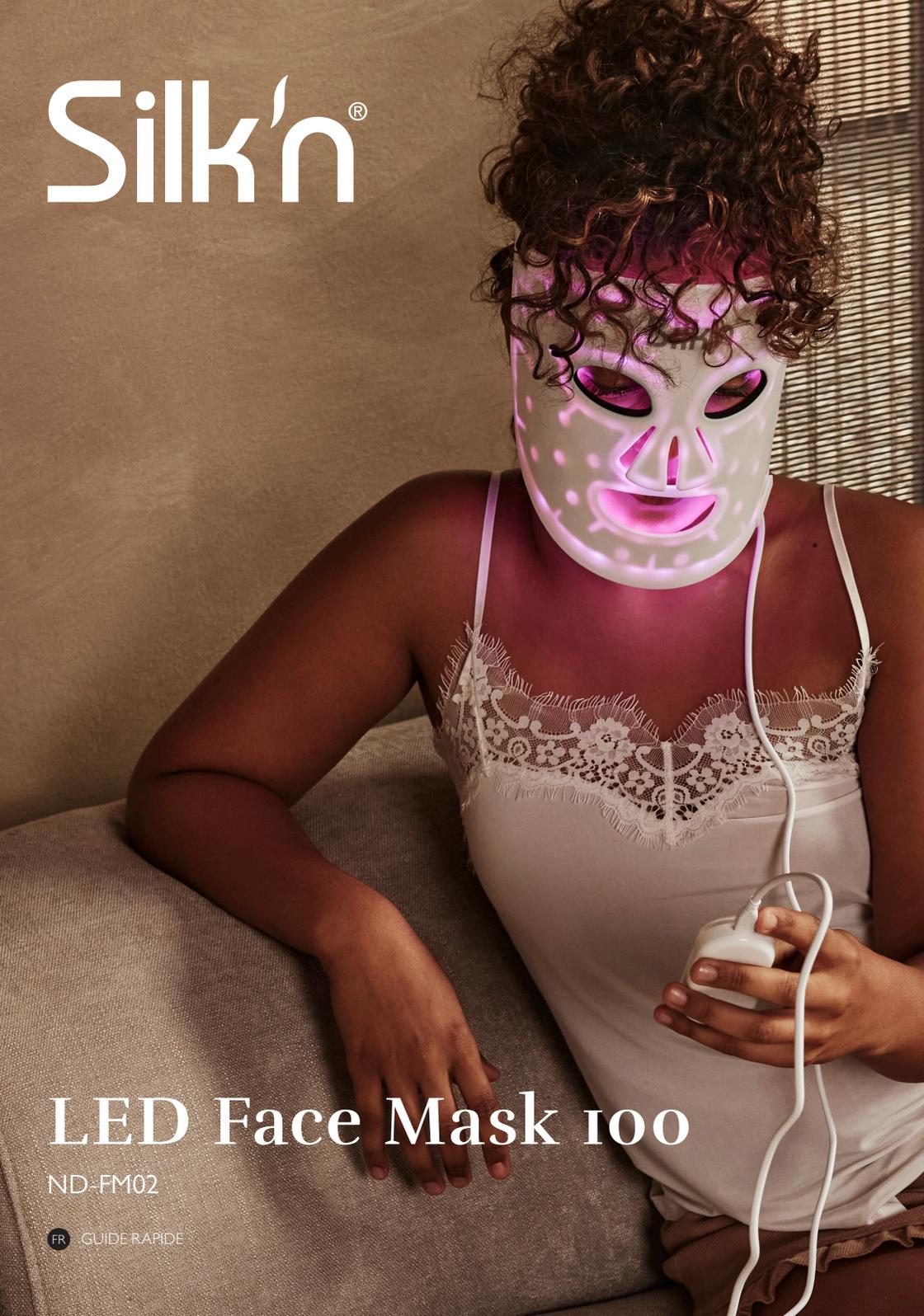

LED Face Mask 100

ND-FM02

FR GUIDE RAPIDE

LED Face Mask 100

Ce masque utilise la lumière LED rouge, bleue, jaune et violette spécialement développée pour lutter contre le vieillissement de la peau, les imperfections et rougeurs ainsi que la peau sèche.



Objectifs des programmes

M1 Réduit les ridules et les rides, stimule le collagène et aide à améliorer la circulation sanguine

M2 Réduit les rougeurs et imperfections liées à l'acné, redonne une peau plus nette et une texture de peau améliorée

M3 Améliore l'hydratation de la peau, apaise les peaux sèches et sensibles

M4 Effet anti-âge et anti-imperfections pour une peau pleine de vitalité et radieuse



Planifications des séances

Si vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez vous en tenir à l'agenda suivant :

Première semaine	Utiliser une fois tous les 3 jours, 10 minutes maximum par séance
Deuxième semaine	Utiliser une fois tous les 2 jours, 10 minutes maximum par séance
Troisième semaine	Utiliser une fois tous les 2 jours, 10 à 15 minutes maximum par séance
Quatrième semaine	Utiliser une fois par jour, 10 à 15 minutes maximum par séance.


Utilisez sur votre peau une ou deux fois par semaine dès que les résultats sont visibles.

Nous vous recommandons de toujours lire l'ensemble des manuels fournis. Veuillez à connaître le mode d'emploi des appareils et lisez les avertissements ! Pour une efficacité maximale, consultez le mode d'emploi.

D'autres questions? Contactez nous par email serviceconsommateurfr@silkn.eu

Contenu de l'emballage/pièces de l'appareil

- 1 Masque facial
- 2 Fiche
- 3 2x grandes sangles élastiques
- 4 2x petites sangles élastiques
- 5 Câble USB
- 6 Adaptateur mural USB
- 7 Connecteur
- 8 4 témoins lumineux de programme
- 9 Témoin lumineux de mode manuel
- 10 Bouton mode
- 11 Port de charge
- 12 Témoin lumineux de mode automatique
- 13 Bouton marche/arrêt (⏻)
- 14 Télécommande

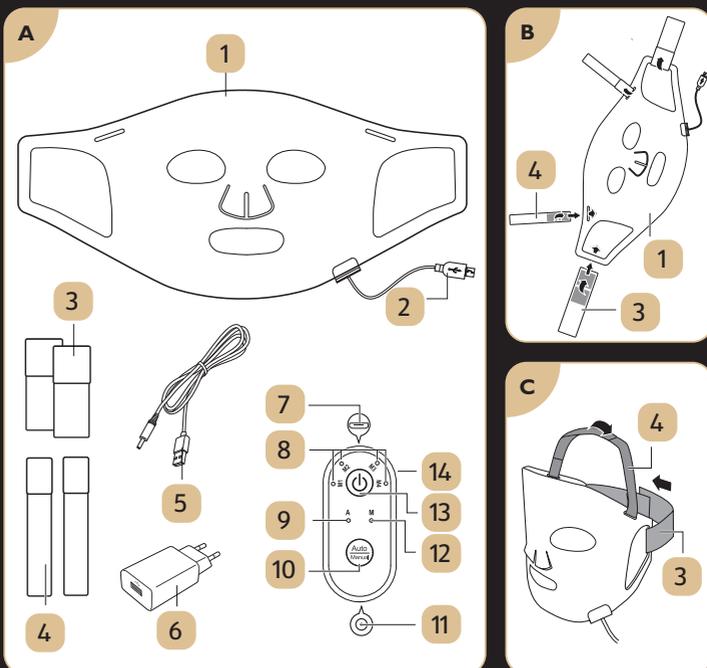

1 Recharge



- Chargez complètement l'appareil avant utilisation et lorsque les niveaux de batterie sont faibles.
- Lorsque la batterie est faible, le voyant 8 de la télécommande 14 clignote et le produit s'éteint automatiquement après avoir clignoté 10 fois. Rechargez le produit.
- Le produit ne peut pas être utilisé durant la charge.
- En cas de stockage du produit pour une période prolongée, veuillez à vérifier le niveau de la batterie au lithium régulièrement et à la recharger si nécessaire.



Recharge

1. Connectez la fiche 2 du masque facial 1 au connecteur 7 de la télécommande 14.
2. Branchez la plus petite fiche du câble USB 5 sur le port de charge 11 de la télécommande 14.
3. Branchez la plus grande fiche du câble USB 5 sur le port de l'adaptateur mural USB 6. Vous pouvez également connecter le câble USB 5 à une source d'alimentation USB compatible (5,0 V, 1,0 A, 5,0 W) (par ex. un PC, un ordinateur portable ou une batterie externe) pour la charge.
4. Branchez l'adaptateur mural USB 6 à une prise secteur pour la charge. Consultez les témoins lumineux 8 pour connaître le niveau de charge :

	25 % de charge
	50 % de charge
	75 % de charge
	Charge complète

5. Une fois la charge complète, débranchez l'adaptateur mural USB 6 de la prise secteur et déconnectez le câble USB 5 du port de charge 11 de la télécommande 14.

2 Fonctionnement

1



Retirer le cordon d'alimentation

Remarque : Assurez vous que le masque ne soit pas raccordé à la prise 11 sinon il ne fonctionnera pas.

2



Pour allumer le masque

Restez appuyé longuement sur le bouton ON/OFF (⏻) 13 pour mettre l'appareil en fonctionnement.

3^a

Mode manuel

1. Par défaut, le produit s'allume en mode manuel avec le programme M1 (rouge) sélectionné. Pour utiliser le mode automatique, consultez le chapitre « Mode automatique ».
2. Si vous souhaitez un autre programme (M2, M3 ou M4) pressez le bouton marche/arrêt (⏻) 13 1 à 3 fois selon le programme voulu. Le témoin lumineux correspondant 8 s'allume pour vous indiquer votre sélection.
Remarque : Le produit s'éteint lorsque le bouton marche/arrêt (⏻) 13 est pressé à quatre reprises.
3. Lorsqu'un programme est sélectionné, le témoin lumineux de mode manuel 9 clignote 5 fois avant de rester allumé en continu et le produit démarre le programme sélectionné.
4. Un programme de soins dure 10 minutes. Le produit s'éteindra automatiquement une fois ce temps écoulé.
5. Vous pouvez aussi appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt (⏻) 13 pour mettre le produit hors tension à tout moment.

3^b

Mode automatique

1. Lorsque le mode auto est sélectionné 10, le témoin lumineux de mode auto 12 clignote 5 fois avant de rester allumé en continu et le produit démarre la séance.
2. En mode auto, le produit applique les programmes dans l'ordre suivant :

M1 (Rouge)	5 min	M3 (Jaune)	4 min
M2 (Bleu)	3 min	M4 (Violet)	3 min

3. Un programme complet de soins dure 15 minutes. Le produit s'éteindra automatiquement une fois ce temps écoulé.
4. Vous pouvez également appuyez longuement sur le bouton marche/arrêt (⏻) 13 pour mettre le produit hors tension à tout moment.

4

Après la séance

Après la séance, retirez le masque et appliquez un sérum et/ou une crème de jour/nuit.

2302_001_FR



Silk'n

Invention Works B.V.
Galileistraat 17, 3029 AL Rotterdam
The Netherlands

Silk'n UK Ltd.
2nd Floor, The Burgh House
Market Road, Wickford, Essex, S512 0FD,
United Kingdom

www.silkn.eu • info@silkn.eu



© 2023 Silk'n Beauty Ltd. All rights reserved. Silk'n and the Silk'n logo are registered trademarks of Silk'n Beauty Ltd.