

Fiche Commercial Synthétique HYPNOS

Masque DreaminzZz Hypnos



Informations

Ce document a pour but de fournir aux partenaires de la société DreaminzZz les informations nécessaires à la complétion de leurs systèmes de vente. Ce document ne doit pas être fourni en l'état aux clients finaux, mais doit permettre d'obtenir les informations synthétiques et pertinentes pour la bonne compréhension du masque HYPNOS. Les visuels HD sont fournis dans un dossier séparément à ce document.

| Rev | Date | Auteur | Note |
|-----|-------------------|-------------|-------------------------------------|
| A | 26 Aout 2017 | K.KASTELNIK | Création du document |
| B | 29 Septembre 2017 | K.KASTELNIK | Mise à jour pour IOS |
| C | 27 Novembre 2017 | K.KASTELNIK | Correctif et mise à jour de version |
| D | 20 Décembre 2017 | K.KASTELNIK | Ajout référence dossier CEM |

Présentation

HYPNOS, le premier masque d'hypnose connecté est une solution Française qui met l'hypnose à la portée de tous pour contribuer à votre bien être. Grâce à lui, vous **améliorez votre sommeil**, vous **gérez mieux le stress** de la vie quotidienne et **atteignez vos objectifs** en toute autonomie.

HYPNOS est un masque connecté, très léger que vous pouvez emporter partout avec vous. Les LEDs et les vibrations, sont synchronisées sur les récits que vous téléchargez sur l'HYPNOSTORE. Ces stimuli vous aident à maîtriser votre respiration et à vous détendre.

L'Hypnostore

Aller mieux, c'est gratuit! Téléchargez **gratuitement** les sessions selon vos envies ou besoins dans la plus grande bibliothèque de sessions d'hypnose disponible (Hypnose, contes, musiques, relaxation, ...). Chaque session vous plonge dans un univers sensoriel immersif. Quoi que vous cherchiez, il y a une session pour ça ! Choisissez, téléchargez et laissez-vous guider...




Apprenez à respirer!

HYPNOS vous propose de respirer en suivant ses lumières. Il vous apprend la cohérence cardiaque. Cet état favorise votre détente et votre relaxation. Il vous permet de favoriser votre endormissement en diminuant votre stress. Inspirez quand les lumières s'allument et expirez lorsqu'elles s'éteignent.

Quelques minutes de respiration guidée suffisent à vous apaiser.

Ah et au fait, tout se passe les yeux fermés!

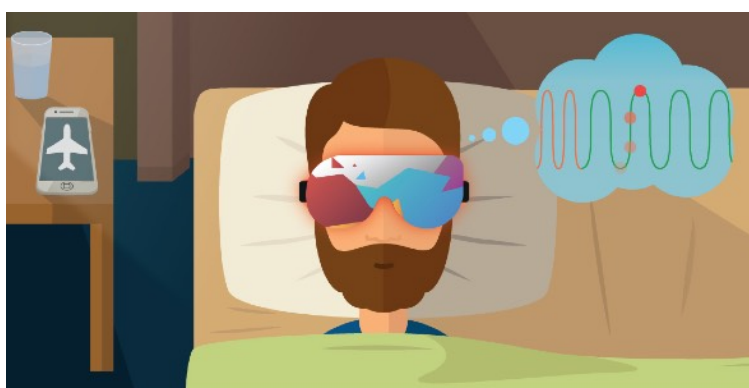


Attaquez chaque journée en pleine forme!

HYPNOS vous réveil naturellement en simulant le lever du soleil à l'heure que vous aurez choisie, en émettant une lumière proche de la lumière naturelle. Vous attaquez la journée du bon pied et tout ça sans réveiller votre partenaire...



Fiche synthèse

| Caractéristiques principales | |
|---------------------------------|--|
| Logo |  |
| Courte description | Hypnos est le premier masque d'hypnose connecté qui vous aide à mieux dormir, gérer votre stress et atteindre vos objectifs. |
| Usage | Pour s'endormir rapidement Pour se réveiller en pleine forme Pour gérer son stress et ses addictions Pour atteindre ses objectifs, et bien d'autres! |
| Procédé | Combinaison d'enregistrements audio à des stimuli visuels pour amplifier l'efficacité de suggestions Hypnotiques. Exercice de respiration lente par synchronisation des inspirations et expirations sur le rythme des lumières à travers les paupières. |
| Prix des programmes hypnotiques | Gratuit! |
| Public | De 5 ans (en étant accompagné d'un adulte) à toute personne en mesure d'utiliser un smartphone! |
| Système d'exploitation | IOS ou Android |

| | |
|------------------------------------|---|
| Compatibilité | Android (KitkAt) 4.4.4 et plus récent. IOS 9 et plus récent Iphone (4S et plus) iPod touch (À partir de la 5ème génération) iPad (À partir de la 3ème génération) |
| Casque audio | Non-fourni Un casque à réduction de bruit est conseillé pour améliorer l'expérience |
| Utilisation | |
| Utilisation | Au coucher et au lever Avant un événement stressant (réunion, examen, opération) En voyage ou pour faire des siestes |
| Efficace contre | L'insomnie d'endormissement, les problèmes de sommeil, le stress, l'anxiété, les addictions, l'hyperactivité, la perte de motivation. |
| Coloris lumière | Toutes les couleurs |
| Fréquence d'utilisation | Tous les jours, dès que le besoin s'en fait sentir |
| Durée d'utilisation | De 8 à 25mn selon le programme choisi en mode hypnose. De 4 à 5mn pour l'aide à l'endormissement Plusieurs heures pour le mode sommeil |
| Autonomie | 1 semaine en mode hypnose en utilisation standard (2 à 3 sessions par jour). 14h en mode sommeil soit environ 2 nuits. Se recharge en 2h environ. |
| Bienfaits | Alternative efficace contre l'utilisation de produits chimiques pour le sommeil et l'anxiété. |
| Le plus | S'utilise les yeux fermés, se glisse dans votre sac, contribue à diminuer le décalage horaire. |
| Caractéristiques techniques | |
| Dimensions | 180mm x 82mm x 14mm <i>* Les éléments composants le masque étant en matière tissu et structure mousse, les dimensions ci-dessous peuvent varier de 1 à 2 mm.</i> |
| Contenu de la boîte | Un masque HYPNOS Un étui de protection Un câble USB Magnétique HYPNOS Une notice d'utilisation et de prise en main rapide |
| Poids | 47g |

| | |
|--|--|
| Alimentation | Batterie Lithium polymer rechargeable Tension d'utilisation 3,3V |
| Connectique | Connecteur magnétique réversible <i>* Câble USB fourni, caractéristique de la recharge 5V, 0,5A minimum.</i> |
| Connectivité | Bluetooth 4.0 Smart Low Energy |
| Stimuli lumineux | 6 Diodes RGB (3 par oeil), 300 lux au total (150 lux par oeil) |
| Vibreur | Micro vibreur |
| Contact électronique avec l'utilisateur | Aucun |
| Enveloppe de protection | Housse en assemblage tissu: <ul style="list-style-type: none"> • Face avant imperméable 100% polyester • Face arrière en 10% elasthane, 55% polyamide, 35% coton noire • Lanière de maintien 8.3% elasthane, 55.7% polyamide, 36% Silicone. |
| Contact mécanique avec l'utilisateur | <ul style="list-style-type: none"> • Face arrière en 10% elasthane, 55% polyamide, 35% coton noire • Lanière de maintien 8.3% elasthane, 55.7% polyamide, 36% Silicone. |
| Numéro d'identification | MSK-PRD-P.2.X |
| Normes | |
| Risque photo biologique* <i>* Caractérise la conformité aux normes européennes de l'utilisation des LEDs lors de l'utilisation du masque HYPNOS</i> | Groupe de risque 0 (Sans risque) , Conformément aux normes - NF EN 62471 : Décembre 2008 Sécurité photobiologique des lampes et des lampes - IEC TR 62778 Edition 2 : Juillet 2014 Application of IEC 62471 for the assessment light sources and luminaires |
| Sécurité électrique* <i>* Caractérise la conformité aux normes européennes à l'utilisation de système intégrant une batterie</i> | Conforme à la norme EN 60950-1 et amds n°R410-17-101407-1A Ed.0, laboratoire EMITECH |
| Compatibilité électromagnétique | EN 301 489-1 V2.2.0 : 2017, EN 301 489-17 : 2017 V3.2.0 pour les essais CEMs numéro de rapport R410-18-100683-1A Ed.0, et EN 300 328 V2.1.1 (2016-11) numéro de rapport R410-18-100683-2A Ed.0, , laboratoire EMITECH |