

# CLARK

Clark est un allié fiable et discret qui veillera sur vous, vos proches, vos voisins ou encore sur cet inconnu que vous croiserez demain.



GARANTI 5 ANS

LE SAVIEZ-VOUS ?

**50 000 personnes meurent d'un arrêt cardiaque chaque année en France.**

C'est 15x plus que les accidents de la route ou 500x plus que les incendies domestiques.

**60 ANS**  
en moyenne

La moyenne d'âge des victimes est d'environ 60 ans, et même 40 ans chez les sportifs amateurs.

**80%**  
d'arrêt à domicile

Les arrêts cardiaques interviennent au domicile dans 80% des cas. Equiper les lieux publics de défibrillateurs n'est donc pas suffisant.

**4 MIN**  
pour intervenir

Le taux de survie n'est que de 5% car il faut intervenir dans les 4 premières minutes pour avoir des chances de sauver une vie.

Chez Lifeaz, nous vous donnons le pouvoir d'agir avec des gestes simples et un défibrillateur.

Alors, rejoignez-nous et protégez les moments qui comptent le plus.

# CLARK EST UN DÉFIBRILLATEUR SIMPLE AVANT TOUT

## AUTO

### Totalement automatique

Clark décide seul de la thérapie à délivrer, vous n'avez aucun risque de vous tromper.



### Guide vocal et visuel

Clark vous guide vocalement étape par étape, il suffit de suivre ses instructions.



### Extrêmement fiable

Clark réalise des auto-test et grâce à la connectivité vous êtes alertés à la moindre anomalie.

## UN FONCTIONNEMENT EN 3 ÉTAPES CLAIRES

1

### Placez les électrodes

Ouvrez le sachet d'électrodes et placez-les comme indiqué sur le schéma. Si besoin, passez au mode enfant. Les électrodes sont compatibles adultes/enfants.

2

### Clark analyse seul le rythme cardiaque

Clark analyse automatiquement le rythme et délivre un choc seulement si c'est nécessaire. Aucun risque d'aggraver la situation si la personne respire normalement et s'est seulement évanouie.

3

### Clark vous guide pour réaliser un massage cardiaque

Clark vous guide avec un bip sonore pour vous donner le rythme du massage cardiaque jusqu'à ce que la victime reprenne conscience.



ON / OFF

### Un bouton ON/OFF


pour allumer Clark. Ensuite, il vous guide étape par étape.



### Mode bilingue

français/anglais activable.

Par défaut, le mode français est activé.

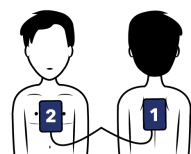

### Bouton pour passer au

mode enfant si la victime a entre 1 et 8 ans.

Par défaut le mode adulte est activé.



## ET TRÈS FACILE À TRANSPORTER

Léger (1,3 kg) et discret, il peut vous accompagner partout, en voiture,  
en vacances, en balade, en randonnée ...



### Certification européenne

Clark est un dispositif médical marqué CE. Sa certification a été revue par des organismes notifiés pour la valider techniquement et cliniquement.



## DÉMONSTRATION DE CLARK



Vous souhaitez apprendre à réagir face à un arrêt cardiaque ?  
Vous avez des questions sur le défibrillateur ?  
Vous souhaitez découvrir comment il fonctionne ?

**Réservez une  
démonstration gratuite !**

[HOME@LIFEAZ.FR](mailto:HOME@LIFEAZ.FR)



# ENTRETIEN ET MAINTENANCE SIMPLIFIÉS



## Auto-Tests

Clark clignote en vert pour vous dire que tout va bien ou en rouge pour vous avertir en cas d'anomalie.



## Connectivité

Grâce à la connectivité, Clark vous prévient ou nous prévient s'il détecte la moindre anomalie.



## Évolutions

Grâce à ses mises à jour régulières, vous bénéficiez automatiquement des dernières innovations.

## Les consommables à changer



**Changement des électrodes  
au bout de 2 ans et demi  
ou en cas d'usage**



**Changement de la batterie  
au bout de 4-5 ans**

## Vous avez 2 options pour gérer la maintenance

### OPTION 1

#### Le Pack Sérénité

Les alertes de maintenance sont gérées par Lifeaz et le renouvellement des consommables est compris.

► **Prix : 4,90€ TTC / mois**

OU

### OPTION 2

#### La gestion autonome

Contactez Lifeaz si vous recevez une alerte de maintenance de la part de Clark et pour renouveler vos consommables.

► **Prix des électrodes : 100€ TTC**

► **Prix de la batterie : 100€ TTC**

# 3 POINTS QUI FONT LA DIFFÉRENCE




Un défibrillateur 100% Fabriqué en France. Conçu à Paris et produit en Normandie.



L'accès gratuit à l'application de sensibilisation Everyday Heroes pour apprendre à sauver des vies en quelques minutes.



Un accompagnement hors pair par notre équipe attentionnée  Disponible facilement à tout moment.

## Témoignages

**Docteur Cassan**, Directeur du centre des 1ers secours de la Croix Rouge Comité scientifique de Lifeaz



**Doit-on avoir un défibrillateur à la maison? Oui, car nul n'est à l'abri de l'arrêt cardiaque, et un défibrillateur augmente les chances de survie.**

**Philippe**, 50 ans, client Lifeaz depuis novembre 2020



**Clark est petit, léger et rassurant. C'est l'appareil idéal, je suis très content. J'encourage tout le monde à s'équiper, l'investissement financier en vaut vraiment le coup.**

**Marie Pierre**, 64 ans, cliente Lifeaz depuis février 2021



**J'ai pensé qu'un arrêt cardiaque pouvait m'arriver à moi, à mon mari, ou à un de mes proches. J'ai donc trouvé tout naturel d'avoir un défibrillateur à la maison.**

## Les médias l'ont passé en revue



**ERGONOMIE**



**FONCTIONS**



**FINITIONS**



**PRIX**



# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## DIMENSIONS

21 x 21 x 7 cm

## POIDS

1,3 Kg

## RÉSISTANCE À L'EAU ET À LA POUSSIÈRE

IEC 60529/EN 60529 IP54 avec les électrodes connectées et la batterie installée.

## DURÉE DE VIE DES ÉLECTRODES

2 ans et demi

## TYPE D'ÉLECTRODES

Universelle adultes/enfants

## DURÉE DE VIE DE LA BATTERIE

4 - 5 ans

## GARANTIE

5 ans

## DURÉE DE VIE DU DÉFIBRILLATEUR

> 10 ans

## STOCKAGE À LONG TERME

Toujours stocker le défibrillateur avec batterie et électrodes dans la plage de température recommandée, entre 5 et 35 °C.

## ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

Appareil à alimentation interne. IEC 60601-1/EN 60601-1. **Pas besoin de brancher l'appareil.**

## CONNECTIVITÉ

2G (forfait géré par Lifeaz, vous n'avez rien à faire)

**LIFEAZ**

 **boulanger**

LE POUVOIR DE  
**SAUVER**  
DES **VIES**